

Protezione degli occhi/Bottiglie lavaocchi-Stazione lavaocchi



9.733 787



6.253 311

3 Stazione lavaocchi di emergenza, montaggio a parete

Stazione montata a parete protetta dalla polvere contenente una bottiglia da 200 ml sterile di soluzione tampone fosfato ed una bottiglia da 500 ml sterile di una soluzione di sodio cloruro, completa con pictogramma e uno specchio. Particolarmente adatta per ambienti di lavoro che richiedono un punto di risciacquo, piccoli posti di lavoro e laboratori mobili. Conforme DIN EN 15154-4.

B-SAFETY

Dimensione stazione lavaocchi (L x P x H): 227 x 110 x 265mm
 Dimensioni stazione lavaocchi DUO (L x P x H): 250 x 115 x 355mm
 Validità: 3 anni
 Durata flusso: circa 7 minuti



Tipo	Pz./Cf.	Codice
Stazione di emergenza lavaggio occhi, a parete.	1	9.733 787 1
Stazione di lavaggio occhi DUO, per entrambi gli occhi	1	6.253 311 2
Bottiglia lavaocchi di ricambio, pH-neutro, piena, 200ml	1	9.733 788
Bottiglia lavaocchi DUO, pH neutro, 500ml	1	9.733 817
Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl, 500ml	1	9.733 793
Bottiglia lavaocchi DUO, 0,9% NaCl, 1000 ml	1	6.240 397




4 5 Mini stazione lavaocchi EyesFresh

NEW!

Stazione di rifornimento ideale per il laboratorio o per tutte le aree di lavoro in cui si utilizzano sostanze aggressive. "Eyes Fresh" può essere collegata a qualsiasi rubinetto dell'acqua fredda. Per normale uso del rubinetto, basta premere il bottone e la funzione lavaocchi si ripristina (ritorna automaticamente alla funzione lavaocchi quando il rubinetto è chiuso). Può essere montato su rubinetti con M22x1, 1/2" oppure 3/8" con filettatura esterna.

Bürkle

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Mini stazione lavaocchi EyesFresh	1	6.076 887

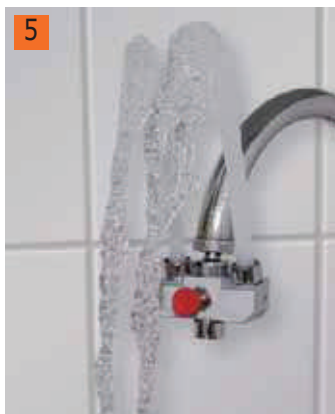
tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
 Tel. 0303562505 r.a. - Fax 0303562517 - www.tecnolab.bs.it
 Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

1 2 Doccia oculare Axion™ eyePOD™

NEW!

Haws AG

The AXION™ eyePOD™ è un rubinetto montato per il lavaggio degli occhi che fornisce servizi per il business professionale, come i laboratori e le strutture educative. Con un semplice movimento del polso il vostro rubinetto standard diventa controllato termicamente da AXION™ Medically Superior Response™ lavaggio occhi, e con un altro movimento del polso si resetta come un rubinetto.

- acciaio inossidabile
- facile utilizzo e pulizia
- installazione semplice, con una varietà di adattatori standard inclusi
- come precauzione per una maggiore sicurezza, l'eyePOD™ è dotato di una valvola di sicurezza termostatica che si spegne automaticamente quando il flusso del lavaggio oculare è a 37°C, deviando tutta l'acqua dal dispositivo di aerazione al fondo dell'unità.

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Doccia oculare AXION™ eyePOD™	1	9.733 755

1



2



5 Doccia lavaocchi

B-SAFETY

Due docce in una. La doccia può essere utilizzata per il lavaggio oculare con installazione fissa su supporto. In questo modo si hanno entrambe le mani libere per aprirsi gli occhi. La doccia può essere anche rimossa dal supporto per poter lavare anche altre parti del corpo o altre persone, tramite un raccordo flessibile.

- Per montaggio a tavolo e a parete
- Le docce rispettano quanto previsto dalla norma EN 15154-2:2006
- Fornite di contrassegno di conformità DIN.
- Le docce garantiscono la distribuzione dell'acqua su una vasta area. In questo modo vengono raggiunte anche le zone intorno agli occhi ed il posizionamento degli occhi sotto l'erogatore non risulta critico.
- I grandi fori nelle docce evitano problemi di ostruzioni da calcare. Gli erogatori delle docce possono essere rimossi per la manutenzione
- Cuffie di gomma proteggono da lesioni da urti
- Leva di comando arretrabile
- Cappucci parapolvere che in caso di azionamento cadono.
- Il regolatore di pressione integrato mantiene costante il getto d'acqua, indipendentemente dalla pressione.
- Una valvola di non ritorno integrata evita il risucchio di acqua usata.

Altezza della doccia:	250 mm
Lunghezza del tubo:	1500 mm
Allacciamento:	raccordo 1/2"
Portata d'acqua:	7 lt/min per ogni erogatore
Foro nel banco:	M 28 x 80 mm.

3



9.733 779

4



9.733 786

Descrizione	Connessione	Pz./Cf.	Codice
1 terminale doccia a 45°		1	9.733 778
2 terminali doccia a 45°		1	9.733 779 3
1 terminale doccia verticale		1	9.733 786 4

5



1 3 Doccia oculare di sicurezza

NEW!

B-SAFETY

- Con due erogatori altamente performanti
- Due tappi di protezione dalla polvere all'interno degli erogatori
- Manicotti di gomma per la protezione delle persone contro ulteriori lesioni
- Supporto per montaggio su tavolo e a muro
- Tubo ricoperto da acciaio inossidabile da 1500 mm
- Regolazione integrata del flusso che garantisce un getto d'acqua uniforme indipendente dalla pressione dell'acqua stessa
- Valvola di non ritorno integrata per evitare il riflusso di sporcizia all'interno dell'acqua potabile
- Conforme a ANSI Z358.1-2004 e DIN EN 15154-2:2006
- Testati e certificati DIN-DVGW

Descrizione	Connessione	Attacco	Pz./Cf.	Codice
Doccia oculare di sicurezza con due erogatori a 45°	1/2" femmina	Montato sul tavolo	1	6.254 947 2
Doccia oculare di sicurezza con due erogatori a 45°	1/2" femmina	Montato a muro	1	9.733 819
Doccia di sicurezza con ciotola in acciaio inossidabile	1/4" femmina	Montato a muro, tubazioni esposte	1	7.653 251



6.254 947




9.733 810

6 Docce

Speciali spruzzatori fanno sì che la grande quantità d'acqua raggiunga il ferito con delicatezza e non danneggi la pelle dello stesso.

B-SAFETY

- Le docce corrispondono a EN 15154-1:2006
- Testati e cetificati DIN-DVGW
- La targhetta secondo DIN è inclusa nella fornitura
- Rubinetto a sfera grande e senza bisogno di manutenzione per grandi quantità d'acqua
- Montaggio semplice
- Costruzione stabile
- Verniciatura a polvere PE, resistente ad agenti chimici
- Asta grande di comando di semplice utilizzo
- Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura
- Raccordo 3/4".

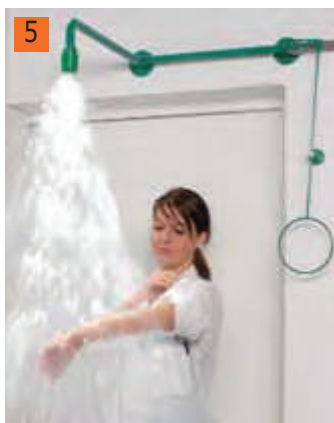

9.733 812

Tubazione di mandata	Attacco	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
Montaggio al suolo	Flangia a muro	625	1	9.733 810 4
Montaggio a scomparsa	Parete / 60 mm - tubo 3/4"	625	1	9.733 811
Montaggio al suolo	Flangia a muro sopra porta	565	1	9.733 812 5



➔ Etichette di pericolo GHS - vedere pagina 240