



Purificazione Acqua Chorus 3 Grado 3



Descrizione

La gamma **PURELAB Chorus** permette di configurare la soluzione più adatta ai propri bisogni, e garantisce una flessibilità d'uso eccezionale grazie alle proprie caratteristiche di modularità e scalabilità.

È il prodotto ideale per la fornitura di acqua purificata ad un'ampia gamma di applicazioni, tra cui analisi qualitative, lavaggio di vetreria da laboratorio, autoclavi, oltre alle più sofisticate tecniche nei campi della ricerca e della sperimentazione.

Caratteristiche:

PURELAB Chorus 1: Acqua ultrapura per applicazioni critiche.

PURELAB Chorus 2: Acqua pura di Tipo II+/II.

PURELAB Chorus 3: Acqua di grado generale di Tipo III.

Erogatori Halo: tre varianti di erogazione remota con sistema di monitoraggio incorporato per Chorus 3.

Serbatoi: progettati per adattarsi ai sistemi di purificazione Chorus in termini di spazio e funzionalità.


PURELAB **Chorus 3 (RO)** è una soluzione ideale per soddisfare il bisogno di acqua di grado generale **Tipo III** (osmotizzata), garantendo allo stesso tempo una flessibilità di utilizzo senza precedenti.



Cartuccia di pretrattamento

Modelli:

- . Il PURELAB Chorus 3 fino a 10 l/h.
- . Il PURELAB Chorus 3 fino a 20 l/h.
- . Il PURELAB Chorus 3 fino a 30 l/h.
- . Modelli precedenti con pompa di spinta.

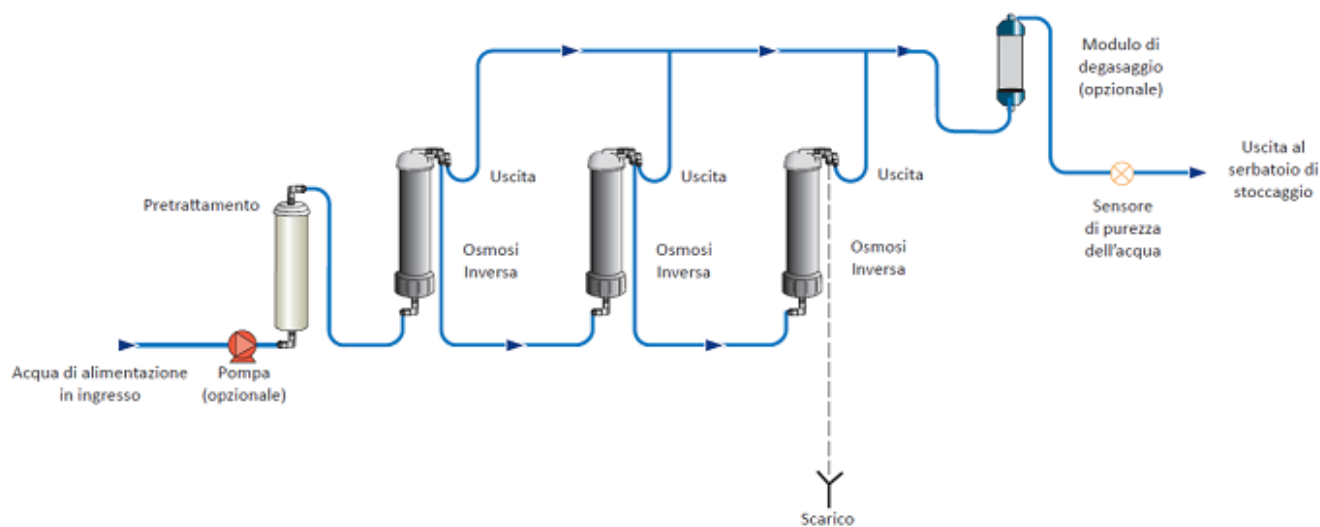

Prodotto	Applicazioni	Tecnologie Utilizzate		
		Pre-trattamento (Carbone)	Osmosi inversa	Degasaggio Opzionale (CO2)
PURELAB Chorus 3	Pre-trattamento / alimentazione di sistemi di Tipo 1 o 2	Si	Fino a 10/20/30 l/h	Si

La rimozione di CO2 da acqua pre-purificata (post RO) allunga la vita dei consumabili posti a valle di PURELAB Chorus 3.

Modello	Rimozione CO2 %
PURELAB Chorus 3 (fino a 10 l/h)	55 %
PURELAB Chorus 3 (fino a 20 l/h)	45 %
PURELAB Chorus 3 (fino a 30 l/h)	35 %

Il modulo di degasaggio è raccomandato quando la CO2 presente in acqua di alimentazione è \geq della conduttività dell'acqua pre-purificata (Permeato RO).

Installazione di massimo 2 Chorus 3 per serbatoi di 15 & 30 Litri.

Installazione di massimo 4 Chorus 3 per serbatoi di 60 & 100 Litri.

Dati Tecnici

Modello	CHORUS 3
Acqua	Tipo 3
Alimentazione	Alimentato con Acqua di rete
Produzione	10 / 20 / 30 l/h

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Purelab Chorus 3 RO 10 l/h	RO310XXM1
Purelab Chorus 3 RO 10 l/h con pompa di spinta	RO310BPM1
Purelab Chorus 3 RO 20 l/h	RO320XXM1
Purelab Chorus 3 RO 20 l/h con pompa di spinta	RO320BPM1
Purelab Chorus 3 RO 30 l/h	RO330XXM1
Purelab Chorus 3 RO 30 l/h con pompa di spinta	RO330BPM1

Accessori

Descrizione	Codice
Purelab Chorus 2 e 3 10 l/h Modulo RO	LC240
Purelab Chorus 2 e 3 Pre-Treatment Pack	LC241