



Termoregolatore Digitale VTF



Descrizione

TF utilizza la tecnologia "FUZZY LOGIC" ed è adatto a molte applicazioni dove è richiesta termoregolazione.

Lo strumento può essere combinato con i più comuni agitatori magnetici riscaldanti e viene fornito pronto per l'uso.

Il comodo sistema di posizionamento della sonda consente all'operatore di regolarne la posizione in modo estremamente facile e rapido, mentre l'esclusivo timer incorporato offre la possibilità di impostare il tempo di termoregolazione.

Grazie all'elemento derivazione PW 10, VTF può essere utilizzato con tutti i tipi di dispositivi di riscaldamento come i bagni ad acqua e olio, piastre riscaldanti, termomanti, ecc.

Il Vertex VTF è completo di sonda di temperatura e cavo di alimentazione per il collegamento diretto agli agitatori magnetici riscaldanti AREX, AREC.X. e AREX Digital (solo versione PRO).

Dati Tecnici

Struttura	tecnopolimero
Fissaggio su aste:	da Ø 10 a 13 mm
Sonda in acciaio inox di tipo Pt 100:	lunghezza 250 mm e Ø 3 mm
Display:	LCD
Grado di protezione CEI EN 60529:	IP 54
Alimentazione:	12 V cc

Peso	0.3 Kg
Dimensioni (L x H x P)	75x145x120 mm
PRESTAZIONI	
Campo di regolazione:	-10...+300 °C
Precisione:	± 0.5 °C
Risoluzione:	0.2 °C
Funzionamento temporizzato:	da 0:00 a 24:59 (h:min)
Visualizzazione del tempo residuo:	possibile
Visualizzazione temperatura massima raggiunta:	possibile

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Visualizzazione a display e spegnimento automatico della piastra riscaldante in caso di:



- Sonda in corto
- Sonda interrotta

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
ARE	230 V / 50 Hz	F20500162
ARE	115 V / 60 Hz	F20510162

Accessori

				
A00001069 Asta di sostegno	A00000273 Calotta sferica per palloni 50 ml	A00000258 Calotta sferica per palloni 100 ml	A00001071 Calotta sferica per palloni 250 ml	A00001072 Calotta sferica per palloni 500 ml
				
A00001073 Calotta sferica per palloni 1000 ml	A00000228 Base AluBlock™	A00000229 AluBlock™ arancione, 4 pos. Ø24 x h 43mm	A00000230 AluBlock™ verde, 4 pos. Ø28 x h 30mm	A00000231 AluBlock™ nero, 4 pos. Ø28 x h 24mm

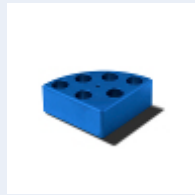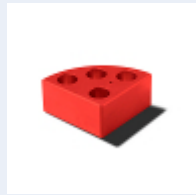

A00000232
AluBlock™
rosso, 4 pos.
Ø21,6 x h 31,7
mm

A00000233
AluBlock™
blu, 6 pos.
Ø17,8 x h
26mm

A00000234
AluBlock™
oro, 11 pos.
Ø15,2 x h
20mm